

beurer

FC 41



EL Συσκευή καθαρισμού πόρων
Οδηγίες χρήσης

CE



Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση, διαθέστε τις και σε άλλους χρήστες και τηρήστε τις υποδείξεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο στον οικιακό/ιδιωτικό τομέα, όχι στον επαγγελματικό.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για άτομα κάτω των 18 ετών.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, όταν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν.
- Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο αυτής της συσκευής πάθει κάποια ζημιά, πρέπει να απορρίπτεται. Αν το καλώδιο δεν αποσυνδέεται από τη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται όλη η συσκευή.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι τη συσκευή, διότι τότε δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη λειτουργία. Σε περίπτωση μη τήρησης παύει να ισχύει η εγγύηση.

Αγαπητοί πελάτες,

σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της σειράς προϊόντων μας. Το όνομά μας είναι συνώνυμο των υψηλών προδιαγραφών και διεξοδικά ελεγμένων προϊόντων ποιότητας στους εξής τομείς: θέρμανση, ήπια θεραπεία, αρτηριακή πίεση/διάγνωση, σωματικό βάρος, μασάζ και ποιότητα αέρα. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις.

Φιλικά, Η ομάδα της Beurer

Πίνακας περιεχομένων

1. Παραδοτέος εξοπλισμός	3
2. Επεξήγηση συμβόλων	4
3. Γνωριμία με τη συσκευή.....	5
4. Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης.....	5
5. Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας	6
6. Περιγραφή συσκευής.....	8
6.1 Συσκευή.....	8
6.2 Εξαρτήματα	8
7. Θέση σε λειτουργία.....	9
8. Χρήση	10
8.1 Δοκιμή στο δέρμα.....	10
8.2 Φόρτιση μπαταρίας	10
8.3 Λαμβάνετε υπόψη πριν από τη χρήση.....	11
8.4 Περιοχές εφαρμογής	12
9. Καθαρισμός και φροντίδα.....	13
10. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα.....	13
11. Απόρριψη	13
12. Τεχνικά στοιχεία	14
13. Εγγύηση/σέρβις	14

1. Παραδοτέος εξοπλισμός









Ελέγξτε τον παραδιδόμενο εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική χαρτονένια συσκευασία είναι ακέραιη και το περιεχόμενο πλήρες. Πριν από τη χρήση πρέπει να βεβαιώνετε ότι η συσκευή και τα παρελκόμενα δεν παρουσιάζουν εμφανείς φθορές και έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.





- 1 x FC 41
- 1 x στρογγυλό εξάρτημα (μεγάλο)
- 1 x στρογγυλό εξάρτημα (μικρό)
- 1 x οβάλ εξάρτημα
- 10 x εφεδρικά φίλτρα αντικατάστασης
- 2 x στεγανοποιητικοί δακτύλιοι
- 1 x κάλυμμα φίλτρου
- 1 x καλώδιο φόρτισης USB
- 1 x αντίτυπο από τις παρούσες οδηγίες χρήσης



2. Επεξήγηση συμβόλων

Στις οδηγίες χρήσης και στη συσκευή χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κοντά ή μέσα σε νερό (π.χ. νιπτήρας, ντους, μπανιέρα) – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προειδοποιητική υπόδειξη για κινδύνους τραυματισμού ή κινδύνους για την υγεία σας
	ΠΡΟΣΟΧΗ Υπόδειξη ασφαλείας για πιθανές ζημιές στη συσκευή/στα παρελκόμενα
	Υπόδειξη Υπόδειξη για σημαντικές πληροφορίες
	Διαβάστε τις οδηγίες
	Συνεχές ρεύμα Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για συνεχές ρεύμα
	Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Κατασκευαστής

	Χρήση μόνο σε κλειστούς χώρους
	Απορρίπτετε τη συσκευασία με οικολογικό τρόπο, σύμφωνα με το περιβάλλον
	Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών.
	Τα προϊόντα ανταποκρίνονται αποδεδειγμένα στις απαιτήσεις του συνόλου των τεχνικών κανόνων της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.

3. Γνωριμία με τη συσκευή

Η συσκευή καθαρισμού πόρων FC 41 προσφέρει βαθύ καθαρισμό στους πόρους χάρη στην πιο μοντέρνα τεχνολογία λειτουργίας υπό κενό. Με τα στρογγυλά εξαρτήματα μπορούν να απομακρυνθούν αποτελεσματικά σπυράκια, σμήγμα και νεκρά κύτταρα. Η συσκευή καθαρισμού πόρων διαθέτει επιπλέον ένα οβάλ εξάρτημα για τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος και της αιμάτωσης του προσώπου.

Η συσκευή καθαρισμού πόρων διαθέτει μια ευκρινή οθόνη LCD για την ένδειξη της κατάστασης της μπαταρίας και τη βαθμίδα έντασης. Με συνολικά 5 βαθμίδες έντασης, η συσκευή καθαρισμού πόρων φροντίζει για τον ατομικό καθαρισμό και τη φροντίδα ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.

4. Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης

Η συσκευή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά σε ενήλικες ανθρώπους (με εξαίρεση τα κινούμενα μέρη στην περιοχή των ματιών και το στόμα). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα!

Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδία χρήση, όχι για ιατρική ή εμπορική χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε και με τον τρόπο που αναφέρεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη! Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή λανθασμένη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν ισχύουν για σας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις

ασφαλείας. Σε περίπτωση που δεν είσαστε βέβαιοι αν η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς, ρωτήστε τον γιατρό σας.

5. Προειδοποιητικές υποδείξεις και υποδείξεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κίνδυνος ασφυξίας από τη συσκευασία! Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά.
- Ελέγξτε πριν από τη χρήση τη συσκευή και τα παρελκόμενα για εμφανείς ζημιές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε στον έμπορό σας ή στην αναφερόμενη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή,

- σε σκασμένο δέρμα
- σε ανοιχτές πληγές
- στην περιοχή των ματιών ή στο στόμα
- σε περιοχές του σώματος εκτός του προσώπου (εκτός από την περιοχή των ματιών και το στόμα)
- κατά την εγκυμοσύνη
- αν έχετε κάνει αισθητική χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο
- αν πάσχετε από καρδιακή πάθηση
- αν πάσχετε από δερματικές ασθένειες (π.χ. έρπης, αγγειακές παθήσεις ή δερματικές νεοπλασίες)
- αν πάσχετε από καρκίνο του δέρματος
- αν πάσχετε από δερματικούς ερεθισμούς
- αμέσως μετά από ηλιοθεραπεία ή σε περίπτωση ηλιακού εγκαύματος
- αν λαμβάνετε φάρμακα, τα οποία περιέχουν στεροειδή
- αν λαμβάνετε αντιπηκτικά φάρμακα
- αν πάσχετε από μία από τις ακόλουθες ασθένειες: σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβήτη ή αυτοάνοσα νοσήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς. Εξαιτίας ακατάλληλων επισκευών μπορεί να προκληθούν σημαντικοί κίνδυνοι για τον χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς αναθέστε την επισκευή της συσκευής σε ειδικευμένο συνεργείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης USB και το τροφοδοτικό δεν έρχονται σε επαφή με νερό, ατμό ή άλλα υγρά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους (π.χ. σε καμία περίπτωση σε μπανιέρα ή σάουνα).
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε χτυπήματα και μην την αφήνετε να πέφτει.
- Να χρησιμοποιείτε/χειρίζεστε τη συσκευή μόνο με στεγνά χέρια.

Υποδείξεις για τον χειρισμό των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

- Εάν έρθει σε επαφή υγρό μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τα σημεία που επλήγησαν και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
- Κίνδυνος κατάποσης! Μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και να πνιγούν. Γι αυτό φυλάσσετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε μέρος μακριά από τα παιδιά!
- Προστατεύετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από υπερβολική θερμότητα.
- Κίνδυνος έκρηξης! Μην ρίχνετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη φωτιά.
- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πριν από τη χρήση με τον προβλεπόμενο τρόπο. Πρέπει πάντα να τηρούνται οι υποδείξεις του κατασκευαστή, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία για τη σωστή φόρτιση, τα οποία περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Φορτίστε πλήρως την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία.
- Φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο πλήρως, για να έχετε μια κατά το δυνατό μεγάλη διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

6. Περιγραφή συσκευής

6.1 Συσκευή

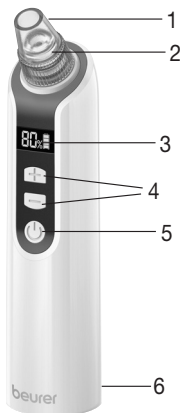

1. Εξάρτημα

2. Κεφαλή αναρρόφησης με κάλυμμα φίλτρου

3. Ένδειξη έντασης και μπαταρίας

4. Πλήκτρο +/-




Για τη ρύθμιση της βαθμίδας έντασης (20%, 40%, 60%, 80% ή 99%)

5. Πλήκτρο ON/OFF

6. Σύνδεση Micro-USB


Για τη φόρτιση της μπαταρίας με το καλώδιο φόρτισης Micro-USB

6.2 Εξαρτήματα


	<p>Στρογγυλό εξάρτημα (μεγάλο) Κατάλληλο για τον καθαρισμό των πόρων σε μεγάλη επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα σημεία του προσώπου, εκτός από το δέρμα γύρω από τα μάτια.</p>
	<p>Στρογγυλό εξάρτημα (μικρό) Κατάλληλο για τον καθαρισμό των πόρων σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία (π.χ. στη μύτη). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα σημεία του προσώπου, ακόμα και στο ευαίσθητο δέρμα γύρω από τα μάτια.</p>
	<p>Οβάλ εξάρτημα Προάγει την ελαστικότητα του δέρματος και την αιμάτωση στο πρόσωπο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στα πτερυγία της μύτης και γύρω από τα μάτια και το στόμα. Συνιστούμε τη χρήση του οβάλ εξαρτήματος με βαθμίδα έντασης 1.</p>

7. Θέση σε λειτουργία


1. Αφαιρέστε με μια περιστροφική κίνηση το εξάρτημα από τη συσκευή και απομακρύνετε το κάλυμμα από την κεφαλή αναρρόφησης.

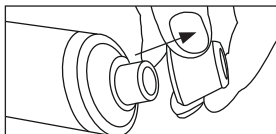


2. Τοποθετήστε το φίλτρο στην κεφαλή αναρρόφησης και κλείστε την ξανά με το κάλυμμα. Προσέχετε ότι το φίλτρο παραμένει στεγνό.

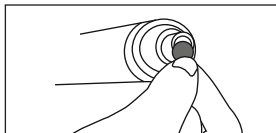


3. Τοποθετήστε το εξάρτημα που θέλετε στην κεφαλή αναρρόφησης.

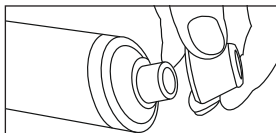

4. Για να ενεργοποιήσετε τώρα τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF. Η ένδειξη έντασης και μπαταρίας ανάβει.

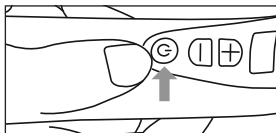

5. Επιλέξτε με το πλήκτρο +/- τη βαθμίδα έντασης που θέλετε. Συνιστούμε κατά τις πρώτες φορές χρήσης να ξεκινήσετε με χαμηλή βαθμίδα έντασης για να συνηθίσετε σιγά σιγά τη συσκευή.

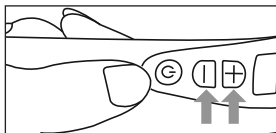


6. Περάστε με το εξάρτημα όλη την επιφάνεια δέρματος του προσώπου. Βεβαιωθείτε ότι δεν εφαρμόζετε το εξάρτημα περισσότερες από μία φορά στο ίδιο σημείο δέρματος του προσώπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την περιποίηση ανατρέξτε στο κεφάλαιο "8.4 Περιοχές εφαρμογής".


Υπόδειξη

Η πίεση κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι ευχάριστη και όχι επώδυνη. Μετά την εφαρμογή είναι φυσιολογικό να εμφανιστεί μια ελαφρά ερυθρότητα.

7. Για να τερματίσετε την εφαρμογή, πιέστε το πλήκτρο ON/OFF. Η ένδειξη έντασης και κατάσταση μπαταρίας σβήνει.

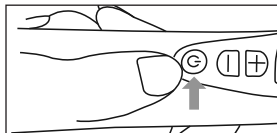

8. Μετά από κάθε εφαρμογή, αλλάζετε το φίλτρο. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε το εξάρτημα με μια περιστροφική κίνηση προς τα επάνω και αφαιρέστε το κάλυμμα προς τα κάτω. Αφαιρέστε το φίλτρο με μιατσιμπίδα.

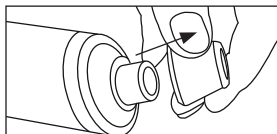

8. Χρήση

8.1 Δοκιμή στο δέρμα

24 ώρες πριν από την εφαρμογή δοκιμάστε τη συσκευή στο δέρμα σας. Δοκιμάστε τη συσκευή ενεργοποιώντας την στο χαμηλότερο επίπεδο έντασης εφαρμόζοντάς την σε μικρά, διακριτικά σημεία του λαιμού. Αν έπειτα από 24 ώρες το σημείο στο οποίο κάνατε τη δοκιμή κοκκινίσει ή πονάει, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο δέρματος για να αποφύγετε τυχόν αιματώματα.

8.2 Φόρτιση μπαταρίας

Προτού θέσετε τη συσκευή για πρώτη φορά σε λειτουργία, φορτίστε την πρώτα για τουλάχιστον 5 ώρες. Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB σε ένα κατάλληλο τροφοδοτικό (έξοδος: 5V, 0,5A) και στη συσκευή. Στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια κατάλληλη πρίζα. Εναλλακτικά, μπορείτε να φορτίζετε τη συσκευή

και με το καλώδιο φόρτισης USB μέσω της σύνδεσης USB του σταθερού/φορητού υπολογιστή σας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης η ένδειξη της κατάστασης μπαταρίας στην οθόνη σας δείχνει την τρέχουσα κατάσταση μπαταρίας. Μόλις φορτιστεί πλήρως η συσκευή, τότε εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη . Μετά από κάθε πλήρη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 90 λεπτά (στη μέγιστη βαθμίδα έντασης). Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας , τότε πρέπει να φορτίσετε ξανά τη συσκευή.

8.3 Λαμβάνετε υπόψη πριν από τη χρήση

Υπόδειξη

Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα του προσώπου είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς κατάλοιπα, όπως πούδρα, κρέμα ή μακιγιάζ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συχνότερα από μία φορά την εβδομάδα.
- Αμέσως μετά την περιποίηση ενδέχεται να υπάρξει μια ελαφρά ερυθρότητα στο δέρμα που υποβάλλατε σε θεραπεία. Αυτό συμβαίνει και η ερυθρότητα εξαφανίζεται το αργότερο μετά από 30 λεπτά από μόνη της.
- Μία ημέρα πριν και μία ημέρα μετά την εφαρμογή αποφύγετε δραστηριότητες που προκαλούν εφίδρωση, όπως σάουνα, σολάριουμ ή έκθεση στον ήλιο.
- Μετά τη χρήση: Καθαρίστε το πρόσωπό σας με νερό και προστατέψτε το από τον ήλιο.

Υπόδειξη

Σε προβληματικές επιδερμίδες χωρίς ιδιαίτερη ευαισθησία η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και δύο φορές την εβδομάδα (με απόσταση τουλάχιστον 48 ωρών στο ενδιάμεσο).


8.4 Περιοχές εφαρμογής

Υπόδειξη

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του προσώπου που περιποιείστε είναι τεντωμένη, ενώ οδηγείτε τη συσκευή πάνω στο δέρμα. Αυτό το επιτυγχάνετε εάν με το ελεύθερο χέρι σας τραβήξετε το δέρμα προς τα κάτω ή προς το πλάι. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο δέρματος.**


Μέτωπο:

Οδηγήστε τη συσκευή αργά και ομοιόμορφα από τη μέση του μετώπου προς τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι δεν οδηγείτε τη συσκευή από την ίδια περιοχή δέρματος πάνω από μία φορά.

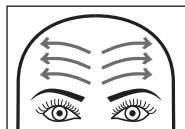

Κρόταφοι:

Οδηγήστε τη συσκευή προς τα έξω με κατεύθυνση τις ρίζες των μαλλιών. Επαναλάβετε στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της μύτης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 1 εκ. από τα μάτια.

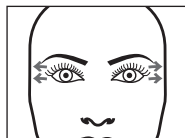

Μύτη:

Οδηγήστε τη συσκευή από το πάνω μέρος της γέφυρας της μύτης προς τα κάτω. Επαναλάβετε στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της μύτης.



Μάγουλα:

Οδηγήστε τη συσκευή προς τα έξω κατά μήκος των μάγουλων.



Γύρω από το στόμα:

Οδηγήστε τη συσκευή στο πάνω χείλος από τη μέση προς τα αριστερά και τα δεξιά. Οδηγήστε τη συσκευή στο κάτω χείλος από τα αριστερά και τα δεξιά προς τα πάνω. Προσέχετε ώστε τα χείλη σας να μην έρθουν σε άμεση επαφή με τη συσκευή!



9. Καθαρισμός και φροντίδα

- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά!
- Απολυμαίνετε τα εξαρτήματα μετά από κάθε εφαρμογή με κοινά απολυμαντικά του εμπορίου.
- Μετά από κάθε εφαρμογή, αλλάζετε το φίλτρο.
- Αν υπάρχουν ακαθαρσίες στη συσκευή, καθαρίζετε την με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
- Προστατεύετε τη συσκευή από χτυπήματα, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και κρατάτε τη μακριά από πηγές θερμότητας (φούρνους, θερμαντικά σώματα).

10. Ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα διατίθενται μέσω της εκάστοτε διεύθυνσης εξυπηρέτησης πελατών (σύμφωνα με τη λίστα διευθύνσεων εξυπηρέτησης πελατών).

Αναφέρετε τον κατάλληλο αριθμό παραγγελίας.

Ανταλλακτικό	Αριθμός είδους ή παραγγελίας
10 Εφεδρικά φίλτρα αντικατάστασης	164083
2 στεγανοποιητικοί δακτύλιοι	164084
Στρογγυλό εξάρτημα (μεγάλο)	164080
Στρογγυλό εξάρτημα (μικρό)	164081
Οβάλ εξάρτημα	164082
USB-Καλώδιο φόρτισης	164079
Κάλυμμα φίλτρου	164085

11. Απόρριψη

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας.



Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση αποριών, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική υπηρεσία.

12. Τεχνικά στοιχεία

Τροφοδοσία	5V === 0,5A
Διαστάσεις	περίπου 172 x 46 x 42mm
<u>Επαναφορτιζόμενη μπαταρία:</u>	
Χωρητικότητα	900mAh
Ονομαστική τάση	3,7V
Ονομασία τύπου	Ιόντων - λιθίου
Βάρος	~150g

13. Εγγύηση/σέρβις

Η Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (εφεξής θα καλείται "Beurer") παρέχει εγγύηση για αυτό το προϊόν υπό τους παρακάτω όρους και στον βαθμό που περιγράφεται παρακάτω.

Οι παρακάτω όροι εγγύησης δεν επηρεάζουν τις νομικές υποχρεώσεις εγγύησης του πωλητή από τη σύμβαση πώλησης με τον αγοραστή. Η εγγύηση ισχύει επίσης χωρίς να παραβλέπονται οι υποχρεωτικές διατάξεις περί νομικής ευθύνης.

Η Beurer εγγυάται την ικανότητα λειτουργίας χωρίς ελαττώματα και την πληρότητα του παρόντος προϊόντος.

Η περίοδος ισχύος της εγγύησης παγκοσμίως είναι 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του καινούργιου, μη χρησιμοποιημένου προϊόντος από τον αγοραστή.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα, τα οποία έχουν αποκτηθεί από τον αγοραστή ως καταναλωτή και προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική οικιακή χρήση.

Ισχύει το γερμανικό δίκαιο.

Στην περίπτωση που το παρόν προϊόν κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αξιολογηθεί ως ανεπαρκές ή ως ελαττωματικό κατά τη λειτουργία σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις, τότε η Beurer παρέχει δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή σύμφωνα με τους παρόντες όρους εγγύησης.

Εάν ο αγοραστής επιθυμεί να προβεί σε αξίωση εγγύησης, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον τοπικό αντιπρόσωπο: βλέπε συνημμένη λίστα "Service International" με τις διευθύνσεις σέρβις.

Ο αγοραστής λαμβάνει έπειτα περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση της αξίωσης εγγύησης. π.χ. πού μπορεί να στείλει το προϊόν και ποια έγγραφα είναι απαραίτητα.

Η διεκδίκηση της εγγύησης εξετάζεται μόνο όταν ο αγοραστής μπορεί να παρουσιάσει

- ένα αντίγραφο του τιμολογίου/της απόδειξης αγοράς
 - το γνήσιο προϊόν
- στην Beurer ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Beurer.

Από την παρούσα εγγύηση αποκλείονται ρητά

- φθορές που προκύπτουν από την κανονική χρήση ή κατανάλωση του προϊόντος,
- εξαρτήματα που συνοδεύουν το παρόν, που φθείρονται ή φτάνουν στο τέλος της ζωής τους κατόπιν ενδεδειγμένης χρήσης (π.χ. μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, μανσέτες, στεγανοποιητικά, ηλεκτρόδια, λαμπτήρες, εξαρτήματα και εξαρτήματα συσκευής εισπνοής),
- προϊόντα που χρησιμοποιούνται, καθαρίζονται, φυλάσσονται ή συντηρούνται με ακατάλληλο τρόπο ή/και μη τηρώντας τους κανόνες των οδηγιών χρήσης, καθώς και προϊόντα που ανοίγονται, επισκευάζονται ή μετασκευάζονται από τον αγοραστή ή από μη εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Beurer,
- ζημιές που προκύπτουν κατά τη μεταφορά μεταξύ κατασκευαστή και πελάτη ή μεταξύ κέντρου σέρβις και πελάτη,
- προϊόντα που αγοράστηκαν ως προϊόν 2ης διαλογής ή ως μεταχειρισμένο προϊόν,
- επακόλουθες ζημιές, που βασίζονται σε κάποιο ελάττωμα του παρόντος προϊόντος (σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαν να εγερθούν ωστόσο αξιώσεις εξαιτίας της ευθύνης για το προϊόν ή εξαιτίας άλλων υποχρεωτικών νομικών διατάξεων ευθύνης).

Οι επισκευές ή η πλήρης αντικατάσταση δεν παρατείνει σε καμία περίπτωση την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

